



펜타닐 테스트 스트립을 사용하여

약품을 검사하는 방법

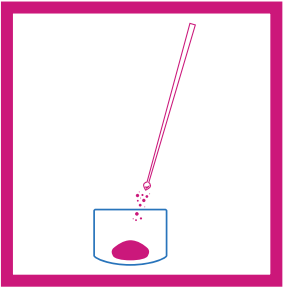

1. 시험하는 약품을 사용하지 않는 작은 용기에 넣습니다.

더 많은 약품을 테스트할수록 더 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

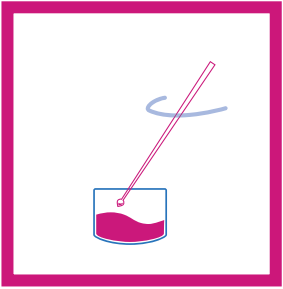


2. 약품에 물을 추가하고 완전히 섞습니다.

약품 10밀리그램(mg)당 1티스푼(5밀리리터)의 물을 첨가하십시오.

10mg은 1센트 동전의 에이브러햄 링컨의 머리카락을 덮거나 표준 마이크로스쿱을 채우는 데 충분한 양입니다.




1티스푼은 탄산음료나 물병의 뚜껑 정도에 담을 수 있는 양입니다.

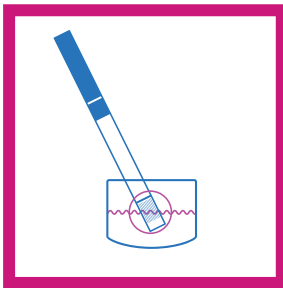

3. 테스트 스트립을 15초 동안 물에 담그십시오. 물결 선을 넘어서 테스트 스트립을 물에 담그지 마십시오.



4. 스트립을 물에서 꺼내 평평한 표면에 2분 동안 놓아두십시오.

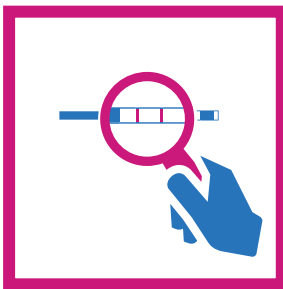

5. 결과 판독:

양성 결과: 펜타닐을 사용할 계획이 없다면, 해당 약물 사용을 피하십시오. 사용하는 경우, 적은 양으로 시작해서 천천히 진행하십시오.



음성 결과: 100% 정확한 검사는 없으며 사용 약품에 펜타닐이 여전히 함유되어 있을 수도 있음을 기억하십시오.



유효하지 않은 검사: 오른쪽에 한 줄만 있거나 아예 선이 없는 경우는 유효하지 않은 검사를 나타냅니다. 약물을 다시 검사하십시오.



펜타닐이 약품에 들어 있지 않더라도 여전히 과다 복용의 위험이 있습니다. 약물 혼합을 피하고, 혼자서 약물을 사용하는 것을 피하고, 항상 날록손 투여와 같은 위험을 줄이기 위한 조치를 취하십시오.



자세한 정보를 보시려면, QR 코드를 스캔하거나 nyc.gov/fentanyl를 방문하십시오.

NYC
Health